


# Melgisorb® Plus

## MEDICAZIONE ASSORBENTE IN ALGINATO


Melgisorb Plus è una medicazione altamente assorbente per ferite da mediamente a molto essudanti

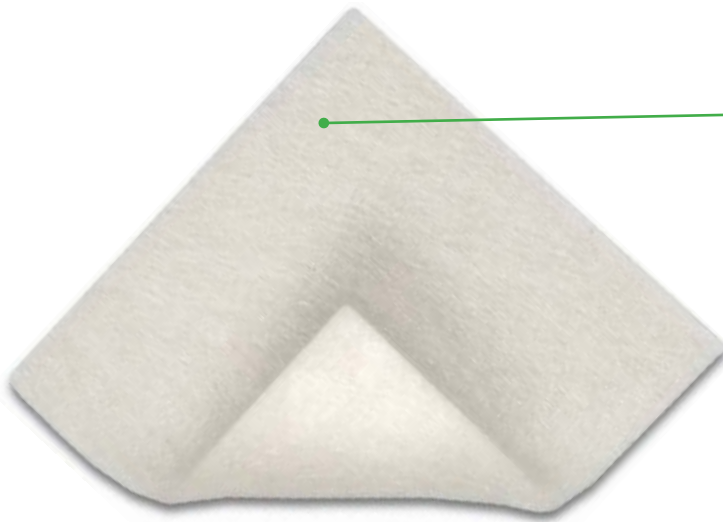


### Fibre idrofile in alginato

- Elevato assorbimento, anche per ferite altamente essudanti
- Ottima resistenza strutturale anche in condizioni bagnate, per facilitare la rimozione in un unico pezzo
- Alta capacità di trattenere i liquidi, per limitare la macerazione

### Come utilizzare Melgisorb® Plus

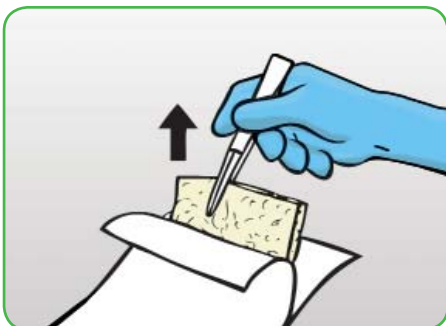


1. Scegliere una misura di Melgisorb Plus di dimensioni leggermente maggiori rispetto alla ferita. Aprire la confezione.

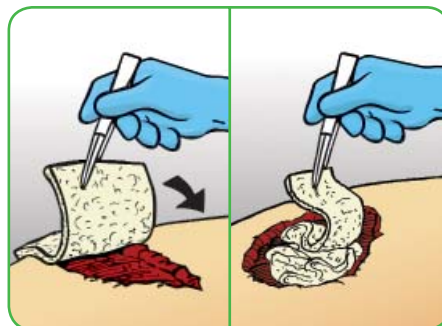

2. Applicare la medicazione asciutta sul letto umido della lesione.

Ferite superficiali: selezionare la medicazione della misura corretta e coprire.

Ferite cavarie: tagliare la medicazione della corretta misura e riempire adeguatamente la lesione.

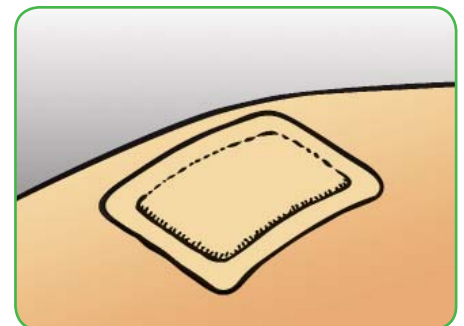

3. Coprire e fissare Melgisorb Plus con una medicazione secondaria appropriata, come Mepilex Border.

Melgisorb Plus può essere applicata sotto bendaggio compressivo.

## Come agisce Melgisorb Plus

Melgisorb Plus assorbe elevate quantità di essudato. A contatto con i fluidi, le fibre di alginato si trasformano in un gel morbido, creando l'ambiente ideale per la guarigione della ferita. Il gel può essere facilmente rimosso irrigando la ferita con normale soluzione salina.

## Benefici di Melgisorb Plus

- Altamente assorbente
- Gelifica a contatto con gli essudati o con soluzioni saline, impedendo alla medicazione di aderire
- Ideale per ferite cavitare
- Ritagliabile
- Conformabile
- E' ben tollerata, basso rischio di irritazioni cutanee

### MELGISORB PLUS

(confezionamento sterile in busta singola peel open)

Articolo	Misura cm	Pezzi confezione	Pezzi cartone
252000	5x5	10	100
252200	10x10	10	100
252500	10x20	10	100
253500	3x45	5	50

## Controindicazioni - Precauzioni d'impiego

- Per uso esterno.
- In caso di ferite infette è consigliato l'utilizzo sotto controllo medico.
- Non utilizzare in pazienti sensibili ai componenti. Il prodotto é generalmente ben tollerato. Nessuna interazione rilevata con altre sostanze.
- Melgisorb Plus non è indicata per ferite asciutte, ustioni di terzo grado, impianti chirurgici.
- In caso di sospetto di infezione, seguire le procedure di trattamento standard, sotto controllo medico.

## Aree di utilizzo

Melgisorb Plus è indicata per il trattamento di ferite moderatamente e molto essudanti, infette o non infette, come:

- ulcere da pressione
- ulcere venose e arteriose
- ulcere diabetiche
- donor site
- ferite chirurgiche
- ferite traumatiche

Melgisorb Plus è disponibile in varie misure, adatte per ferite superficiali e cavitare.

## Sterilità

- Sterilizzato ad ossido di etilene con processo validato secondo le EN 550:1994, ISO 11135:1994 e ISO 109937:1995 per i residui EtO.
- La sterilità della confezione individuale è garantita per 3 anni, a condizione che questa sia integra, cioè non sia stata aperta o danneggiata.

## Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente al riparo da condizioni estreme di umidità, polvere, agenti inquinanti, ecc.