



MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO

- Minimizza il dolore al paziente ed i traumi alla ferita al cambio di medicazione^{1,2}
- Si adatta perfettamente ai contorni del corpo, garantendo maggior comfort al paziente
- Non scivola al di sotto di sistemi di fissaggio e può essere tagliata su misura*

Strato di contatto Safetac® in silicone morbido

- Riduce dolore e traumi prima, durante e dopo la rimozione¹
- Non aderisce al letto umido della ferita
- Minimizza il rischio di macerazione, grazie all'effetto sigillante del silicone sui bordi della ferita

Tampone assorbente

- Trattiene l'essudato
- Si conforma perfettamente alle aree del corpo
- Può essere applicato sotto elastocompressione

Film esterno in poliuretano

- Traspirante
- Idrorepellente
- Barriera a virus e batteri**



** Microrganismi di misura superiore a 25 nm

La tecnologia Safetac®

*Non è necessario tagliare Mepilex su misura, se utilizzata sotto elastocompressione

Tecnologia Safetac®. Minimizza traumi e dolore.

Safetac è una tecnologia brevettata che minimizza il dolore al paziente ed i traumi alla lesione. La tecnologia Safetac è presente esclusivamente nelle medicazioni Mölnlycke Health Care della famiglia Mepilex®, Mepitel®, Mepiform®, Mepitac®.

www.molnlycke.com




Con un adesivo tradizionale si verifica l'asportazione di cellule epidermiche



Con la Tecnologia Safetac non si verifica l'asportazione di cellule epidermiche

Come si usa Mepilex®

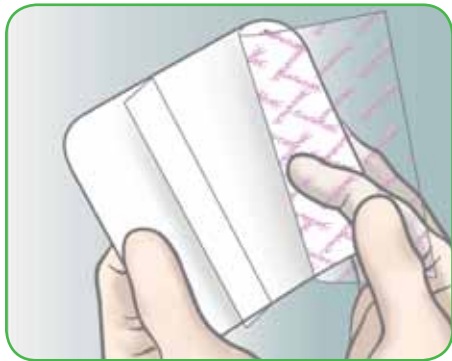

Detergere la ferita. Asciugare accuratamente la cute perilesionale. Rimuovere la pellicola protettiva.



Mepilex deve coprire la cute perilesionale con un margine di almeno 2 cm oltre la zona da trattare. Applicare la medicazione sulla ferita. Non tendere la medicazione durante l'applicazione.



Fissare Mepilex con una benda o altro dispositivo di fissaggio, secondo necessità.

Come agisce Mepilex

Mepilex è una medicazione in schiuma di poliuretano ad alta conformabilità, che assorbe l'essudato e mantiene l'ambiente della ferita umido. Lo strato di contatto Safetac sigilla i margini della ferita, evitando che l'essudato fuoriesca verso la cute perilesionale e minimizzando quindi il rischio di macerazione. L'esclusiva Tecnologia Safetac garantisce la rimozione atraumatica per la ferita e per la cute perilesionale e non causa dolore aggiuntivo al paziente.

Benefici di Mepilex

- Minimizza i traumi alla ferita ed il dolore per il paziente al cambio della medicazione
- Facile da maneggiare, può essere utilizzata sotto sistemi di fissaggio o bendaggi elastocompressivi
- Può essere tagliata su misura, per conformarsi perfettamente alle aree del corpo difficili da medicare
- Garantisce il comfort del paziente
- Può rimanere in situ per più giorni, in relazione allo stato della ferita e della cute perilesionale
- Può essere rimossa e riposizionata, senza perdere la caratteristica microaderenza selettiva
- Basso rischio di reazioni allergiche ed irritazioni cutanea

Aree di utilizzo

Mepilex è indicata per la gestione di ferite essudanti, quali ulcere degli arti inferiori, del piede diabetico, ulcere da pressione e ferite traumatiche, come lesioni cutanee e ferite che guariscono per seconda intenzione.

Note

In caso di segni clinici di infezione, proseguire con l'utilizzo di Mepilex, previa somministrazione di un trattamento antibiotico appropriato.



MEPILEX

(confezionamento sterile in busta singola)

Articolo	Misura cm	Pezzi dispenser	Pezzi cartone
294015	5 x 5	5	40
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 20	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20
294500	20 x 50	2	12

MEPILEX HEEL, SAGOMATA PER IL TALLONE

(confezionamento sterile in busta singola)

288100	13 x 20	5	25
288300	15 x 22	5	30