


Scheda Tecnica

ISO 09.18.05.003 ISO 09.18.08.003
CND A100201
RDM 132217/R

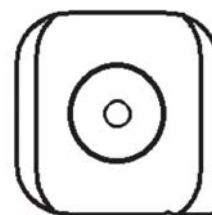

PRODUTTORE	Hollister Incorporated Libertyville, Illinois – U.S.A – Hollister ULC - Ballina
DISTRIBUTORE	Hollister S.p.A. - Strada 4, Palazzo A/7 Milanofiori-Assago Milano Italia
DESCRIZIONE	<p>La placca Conform 2 Con Adesivo è un dispositivo medico indicato per Colostomia, Ileostomia e Urostomia. Sistema a due pezzi da utilizzare con le sacche Conform 2</p> <ul style="list-style-type: none">• Placca quadrata ad angoli arrotondati, dimensioni ca 100x100 mm, massima flessibilità e adattabilità ai contorni del corpo, a vantaggio del comfort e dell'aderenza, contro il rischio di infiltrazioni• Ritagliabile da 13 mm, maggiore adattabilità alle stomie irregolari• Barriera protettiva autoportante a spessore differenziato, estremamente flessibile, con spessore decrescente dal centro ai bordi• Idrocolloide FlexWear, alta resistenza per una maggiore durata in uso, resistenza all'erosione, mantiene la forma anche in presenza di fluidi e garantisce la massima protezione in zona peristomale• Adesivo sintetico Hollister presente su due lati, facilita l'applicazione, assicura immediata adesione e migliora la sicurezza in uso• Pellicola di protezione trasparente con linguetta e guida al ritaglio, per facilitare l'ispezione dell'idrocolloide, la preparazione e l'applicazione• Flangia flottante (brevetto Hollister Incorporated) con meccanismo di aggancio Center Point Lock, studiato per consentire l'applicazione atraumatica senza pressione sull'addome, rende meno rigido e più confortevole il sistema sacca-placca. Ultra sottile consente la massima libertà di movimento. Un "Clic" che conferma a chiusura del meccanismo di aggancio garantisce assoluta sicurezza
COMPOSIZIONE	<p>La placca è così composta nelle sue parti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Idrocolloide FlexWear in PIB, CMC, Pectina e Microfibre• Flangia in PE con supporto (flottante) in Saranex™• Pellicola di protezione• Adesivo di sintesi Hollister• Film polimerico di supporto dell' idrocolloide
CE MARK	Dispositivo di Classe I a marchio CE
DESTINAZIONE D'USO	Dispositivo medico per colostomie, ileostomie e urostomie. Sistema a due pezzi
CONTROINDICAZIONE	Non sono presenti controindicazioni all'utilizzo di questo dispositivo
DURATA IN USO	Si consiglia di tenere la placca in sede da 2 a 7 giorni
LATTICE	Privo di lattice
FTALATI	Privo di DEHP, DBP e BBP
VALIDITA'	Il prodotto ha validità 5 (cinque) anni dalla data di produzione, la scadenza è indicata sulla confezione.

CONFORM 2 CON ADESVO

Placche per colostomia, ileostomia e urostomia

Scheda Tecnica

- CONFEZIONAMENTO** Confezionamento di vendita:
- Scatola in cartone da 5 pezzi con istruzioni per l'uso in italiano
- Imballaggio:
- Scatola in cartone da 36 confezioni
- CONSERVAZIONE** Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- SMALTIMENTO** Non necessità di particolari protocolli di smaltimento.

Cod. Art.	Descrizione	Misura placca mm	Misura Flangia mm
33500	CONFORM 2 CON ADESIVO	13-20	35
34500	CONFORM 2 CON ADESIVO	13-30	45
35500	CONFORM 2 CON ADESIVO	13-40	55
37500	CONFORM 2 CON ADESIVO	13-55	70