


Scheda Tecnica

ISO 09.18.05.003 ISO 09.18.08.003
CND A100201
RDM 132217/R

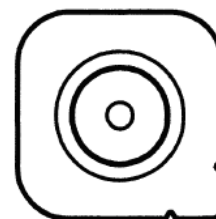

PRODUTTORE	Hollister Incorporated Libertyville, Illinois – U.S.A – Hollister ULC - Ballina
DISTRIBUTORE	Hollister S.p.A. - Strada 4, Palazzo A/7 Milanofiori-Assago Milano Italia
DESCRIZIONE	<p>La placca Conform 2 è un dispositivo medico da utilizzare con le sacche Conform 2 per Colostomia, Ileostomia e Urostomia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Placca quadrata ad angoli arrotondati, dimensioni ca 100x100 mm, massima flessibilità e adattabilità ai contorni del corpo, contro il rischio di infiltrazioni• Idrocolloide SoftFlex unisce elevata resistenza ed eccezionale tollerabilità cutanea. Ideale per ogni tipo di pelle, non irrita alla rimozione• Barriera protettiva autoportante a spessore differenziato, estremamente flessibile, con spessore decrescente dal centro ai bordi• Ritagliabile da 13 mm, maggiore adattabilità alle stomie irregolari• Pellicola di protezione trasparente con linguetta e guida al ritaglio, per facilitare l'ispezione dell'idrocolloide, la preparazione e l'applicazione• Flangia flottante (brevetto Hollister Incorporated) con meccanismo di aggancio Center Point Lock, studiato per consentire l'applicazione atraumatica senza pressione sull'addome, rende meno rigido e più confortevole il sistema sacca-placca. Ultra sottile consente la massima libertà di movimento. Un "Clic" che conferma a chiusura del meccanismo di aggancio garantisce assoluta sicurezza
COMPOSIZIONE	<p>La placca è così composta nelle sue parti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Idrocolloide SoftFlex in PIB, CMC, Pectina e Microfibre• Flangia in PE con supporto (flottante) in Saranex™• Pellicola di protezione• Film polimerico di supporto dell' idrocolloide
CE MARK	Dispositivo di Classe I a marchio CE
DESTINAZIONE D'USO	Dispositivo medico per colostomie, ileostomie e urostomie. Sistema a due pezzi
CONTROINDICAZIONE	Non sono presenti controindicazioni all'utilizzo di questo dispositivo
DURATA IN USO	Si consiglia di tenere la placca in sede da 2 a 7 giorni
LATTICE	Privo di lattice
FTALATI	Privo di DEHP, DBP e BBP
VALIDITA'	Il prodotto ha validità 5 (cinque) anni dalla data di produzione, la scadenza è indicata sulla confezione.
CONFEZIONAMENTO	<p>Confezionamento di vendita:</p> <ul style="list-style-type: none">• Scatola in cartone da 5 pezzi con istruzioni per l'uso in italiano <p>Imballaggio:</p> <ul style="list-style-type: none">• Scatola in cartone da 36 confezioni

Scheda Tecnica

CONSERVAZIONE Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.

SMALTIMENTO Non necessità di particolari protocolli di smaltimento.

Cod. Art.	Descrizione	Misura placca mm	Misura Flangia mm
23200	CONFORM 2	13-20	35
24200	CONFORM 2	13-30	45
25200	CONFORM 2	13-40	55
27200	CONFORM 2	13-55	70