


## Scheda Tecnica

ISO 09.18.05.006 ISO 09.18.08.006
CND A100201
RDM 132217/R

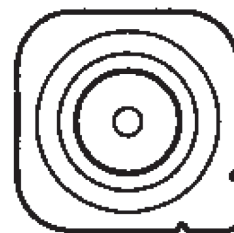

<b>PRODUTTORE</b>	Hollister Incorporated Libertyville, Illinois – U.S.A – Hollister ULC - Ballina
<b>DISTRIBUTORE</b>	Hollister S.p.A. - Strada 4, Palazzo A/7 Milanofiori-Assago Milano Italia
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>La placca Conform 2 Convex è un dispositivo medico indicato per Colostomia, Ileostomia e Urostomia. Sistema a due pezzi da utilizzare con le sacche Conform 2.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Placca quadrata ad angoli arrotondati, dimensioni ca 100x100 mm, massima flessibilità e adattabilità ai contorni del corpo, a vantaggio del comfort e dell'aderenza, contro il rischio di infiltrazioni</li><li>• Profilo convesso, profondità di circa 4,5 mm, atraumatico, con disegno anatomicamente studiato per un'uniforme pressione su tutta l'area interessata</li><li>• Ritagliabile da 13 mm, maggiore adattabilità alle stomie irregolari</li><li>• Barriera protettiva autoportante a spessore differenziato, estremamente flessibile, con spessore decrescente dal centro ai bordi</li><li>• Idrocolloide FlexWear, alta resistenza per una maggiore durata in uso, resistenza all'erosione, mantiene la forma anche in presenza di fluidi e garantisce la massima protezione in zona peristomale</li><li>• Pellicola di protezione trasparente con linguetta e guida al ritaglio, per facilitare l'ispezione dell'idrocolloide, la preparazione e l'applicazione</li><li>• Flangia flottante (brevetto Hollister Incorporated) con meccanismo di aggancio Center Point Lock, studiato per consentire l'applicazione atraumatica senza pressione sull'addome, rende meno rigido e più confortevole il sistema sacca-placca. Ultra sottile consente la massima libertà di movimento. Un "Clic" che conferma a chiusura del meccanismo di aggancio garantisce assoluta sicurezza</li></ul>
<b>COMPOSIZIONE</b>	<p>La placca è così composta nelle sue parti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Idrocolloide FlexWear in PIB, CMC, Pectina e Microfibre</li><li>• Flangia ed Inserto convessità in PE</li><li>• Supporto (flottante) in Saranex<sup>TM</sup></li><li>• Pellicola di protezione</li><li>• Film anelastico di protezione idrocolloide</li></ul>
<b>CE MARK</b>	Dispositivo di Classe I a marchio CE
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Dispositivo medico per colostomie, ileostomie e urostomie. Sistema a due pezzi
<b>CONTROINDICAZIONE</b>	Non sono presenti controindicazioni all'utilizzo di questo dispositivo
<b>DURATA IN USO</b>	Si consiglia di tenere la placca in sede da 2 a 7 giorni
<b>LATTICE</b>	Privo di lattice
<b>FTALATI</b>	Privo di DEHP, DBP e BBP
<b>VALIDITA'</b>	Il prodotto ha validità 5 (cinque) anni dalla data di produzione, la scadenza è indicata sulla confezione.

## Scheda Tecnica

- CONFEZIONAMENTO** Confezionamento di vendita:
- Scatola in cartone da 5 pezzi con istruzioni per l'uso in italiano
- Imballaggio:
- Scatola in cartone da 24 confezioni
- CONSERVAZIONE** Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- SMALTIMENTO** Non necessità di particolari protocolli di smaltimento.

<b>Cod. Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Misura placca mm</b>	<b>Misura Flangia mm</b>
24300	CONFORM 2 CONVEX	13-25	45
25300	CONFORM 2 CONVEX	13-38	55
27300	CONFORM 2 CONVEX	13-51	70