


Scheda Tecnica

(ex) ISO	09.18.05.009
NUOVI LEA - ISO 2017* <small>*DPCM del 12 Gennaio 2017 – G.U. n°65 del 18/03/2017</small>	09.18.05.003 09.18.05.006
CND	A100202
RDM	131398/R

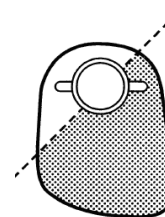

- PRODUTTORE** Hollister Incorporated
Libertyville, Illinois – U.S.A – Hollister ULC - Ballina
- DISTRIBUTORE** Hollister S.p.A. - Strada 4, Palazzo A/7
Milanofiori-Assago Milano Italia
- DESCRIZIONE** La sacca chiusa Conform 2 è un dispositivo medico indicato per la raccolta di feci. Sistema a due pezzi da utilizzare con le placche Conform 2.
- Forma anatomica, ampia capacità di contenimento e massima discrezione durante l'utilizzo
 - Pellicola laminata a 4 strati Quiet Film, anti-fruscio, anti-odore, morbida e delicata al contatto con la cute
 - Rivestimento in T.N.T. (tessuto non tessuto) Comfort Wear, presente su entrambi i lati o solo a contatto col corpo se trasparente, non trattiene l'umidità, morbido, traspirante e si asciuga facilmente. Color pelle per maggior discrezione
 - Filtro AF300 al carbone attivo al 100%, superficie attiva 300mm² protetto da due speciali membrane in Gore™ materiale permeabile ai gas, impermeabile a oli e liquidi (brevetto Hollister Incorporated) situato nella zona apicale per consentire pieno utilizzo della sacca, previene i rigonfiamenti, impedisce le perdite, non necessita di copri filtro
 - Flangia per il fissaggio alla placca in materiale polimerico plastico, con doppia sicurezza laterale, ultraflessibile per massima sicurezza. Profilo ridottissimo per una discrezione totale
 - Flangia per cintura, elastica, ad aggancio facilitato, abbina il massimo comfort ad una maggiore sicurezza
- COMPOSIZIONE** La sacca è così composta nelle sue parti:
- Rivestimento ComfortWear in T.N.T. in PE Spunbond
 - Film multistrato polimerico in EVA, PVDC e CI LDPE
- Il filtro AF300 è così composto nelle sue parti:
- Carbone attivo al 100% in viscosa incenerita + attivatori della funzione deodorante con superficie attiva 300 mm²
 - Membrane Gore™ in e-PTFTE interne ed esterne
 - Capsula di protezione in EMA
- La flangia in PE
- CE MARK** Dispositivo di Classe I a marchio CE
- DESTINAZIONE D'USO** Dispositivo medico per colostomie. Sistema a due pezzi.
- CONTROINDICAZIONE** Non sono presenti controindicazioni note all'utilizzo di questo dispositivo
- DURATA IN USO** Si consiglia di tenere in sede la sacca da 12 a 48 ore.
- LATTICE** Privo di lattice

FTALATI Privo di DEHP, DBP e BBP

VALIDITA' Il prodotto ha validità 5 (cinque) anni dalla data di produzione, la scadenza è indicata sulla confezione.

CONFEZIONAMENTO Confezionamento di vendita:
• Scatola di cartone da 30 pezzi con istruzioni per l'uso in italiano
Imballaggio:
• Scatola di cartone da 12 confezioni

CONSERVAZIONE Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.

SMALTIMENTO Non richiede particolari protocolli di smaltimento. In presenza di procedure/disposizioni istituzionali riferirsi alle specifiche norme precauzionali nella manipolazione

Cod. Art. Opaca	Cod. Art. Trasparente	Descrizione	Misura flangia mm	Capacità ml
24400		CONFORM 2	45	550
25400		CONFORM 2	55	550
27400		CONFORM 2	70	550
	24500	CONFORM 2	45	550
	25500	CONFORM 2	55	550
	27500	CONFORM 2	70	550
24420		CONFORM 2 MAXI	45	700
25420		CONFORM 2 MAXI	55	700
27420		CONFORM 2 MAXI	70	700
	24520	CONFORM 2 MAXI	45	700
	25520	CONFORM 2 MAXI	55	700
	27520	CONFORM 2 MAXI	70	700